



Präanalytik

1.




Den Sammelbecher mit mindestens 4.0ml Urin befüllen.

2.



Ein Xpert® Urin Transport Reagenz Kit bereitstellen.

3.

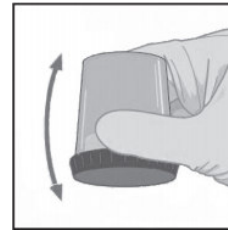

Den Becher 3-mal kippen, um den Urin zu mischen.


4.



Die Pipette aus dem Xpert® Urin Transport Reagenz Kit nehmen.


Die Pipette am Boden des Sammelbechers ansetzen.

5.

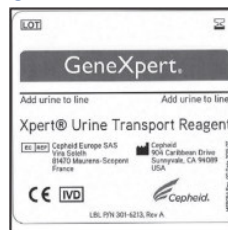

Ca. 4.0ml des Urins in das Transportröhrchen übertragen, so dass die schwarze Volumen Markierung auf der Etikette erreicht wird.

6.

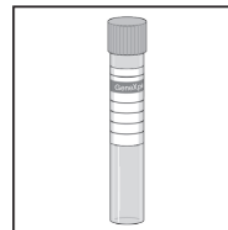

Das Röhrchen mit dem Deckel gut verschliessen, die Probe beschriften und an **labor team w ag** senden.

Pré-analytique

1.




Remplir le gobelet collecteur avec au moins 4,0 ml d'urine.

2.



Préparer un kit Xpert® Urin Transport Reagenz.

3.

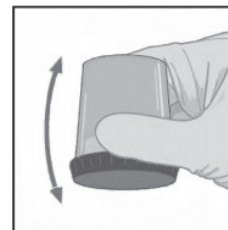

Basculer le gobelet 3 fois pour mélanger l'urine.


4.



Prendre la pipette du kit Xpert® Urin Transport Reagenz.


Positionner la pipette au fond du gobelet collecteur.

5.

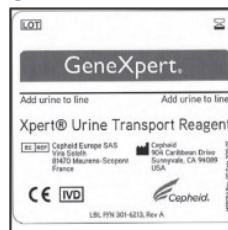

Transvaser 4,0 ml d'urine dans l'éprouvette de transport, jusqu' au marquage noir sur l'étiquette.

6.

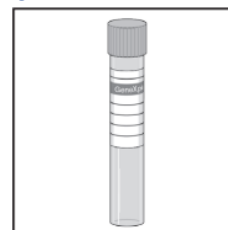

Bien refermer le tube, marquer l'éprouvette et l'envoyer à **labor team w ag**.



Fase preanalitica

1.




Versare nel contenitore almeno 4,0 ml di urina.

2.




Tenere a portata di mano il Xpert® Urin Transport Reagenz Kit.

3.

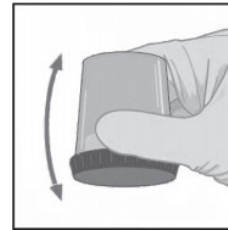


Capovolgere il contenitore 3 volte per miscelare l'urina.

4.

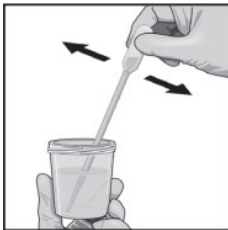


Prendere la pipetta dal Xpert® Urin Transport Reagenz Kit. Introdurre la pipetta nel contenitore fino a toccare il fondo del recipiente.

5.

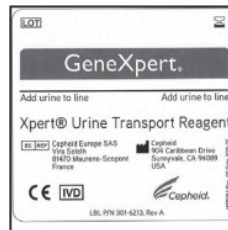

Trasferire ca. 4,0 ml di urina nella provetta per il trasporto, fino a raggiungere la tacca nera segnata sull'etichetta.

6.

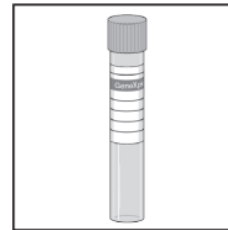

Chiudere bene il tubo, applicare un'etichetta sul campione e inviarlo a **labor team w ag**.

Preanalytics

1.




Fill the collection container with at least 4.0ml urine.

2.



Prepare an Xpert® urine transport Reagent kit.

3.

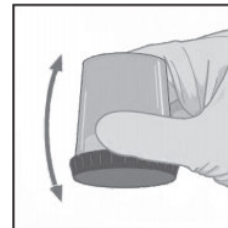


Turn the collection container upside down 3 times in order to mix the urine.

4.




Take the pipette out of the Xpert® urine transport reagent kit. Apply the pipette to the bottom of the container.

5.

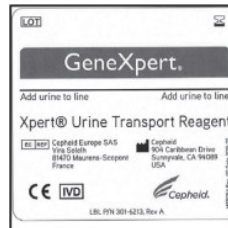

Transfer about 4.0ml of urine into the transport tube, and proceed to fill with fluid up to the black mark on the label.

6.

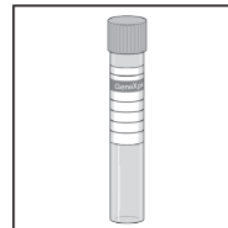

Recap the tube tightly, mark the sample and send it to **labor team w ag**.